

Fiche technique

Tensiomètre digital brassard Vog Protect



 Haute pression
Basse pression
Rythme cardiaque

 99
Mémoire des 99
dernières mesures

 Affichage
digital

Description produit

Fiche technique

Le tensiomètre Vog Protect est un appareil médical qui permet de mesurer la pression sanguine et le pouls au niveau du bras. Cet appareil de mesure reprend les fonctions que doit disposer un tensiomètre au bras. La prise en main est classique et ergonomique pour faciliter la prise de mesure.

Spécifications

Methode de mesure : oscillatoire

Precision : Pression statique : +/- 0.4kPa / Pouls : +/- 5%

Alimentation : DC 6V (1.5V 4piles AAA)


Poids : environ 220g (piles exclues)

Dimensions : 115x96x59mm


Contenu de la boîte : 1 tensiomètre, 1 manuel d'utilisation, 4 piles LR06

Pile fourni.

Utilisation correcte

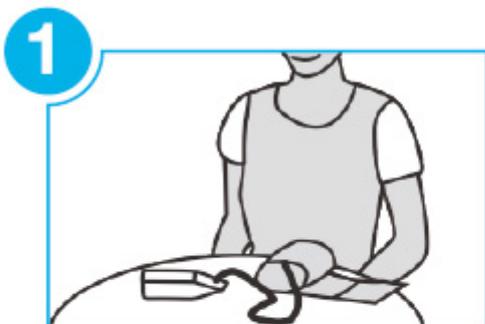


1 Restez détendu avant la mesure. Asseyez-vous pendant un moment.

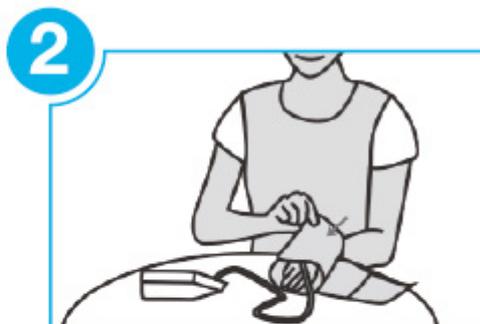

2 Paume vers le haut, placez le brassard parallèlement au cœur.



3 Paumes vers le haut, gardez le tuyau d'admission parallèle au bras.

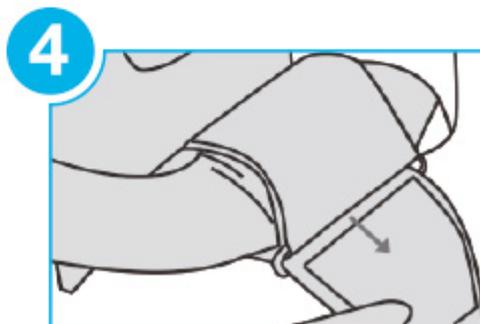

4 Enroulez le brassard autour du bras, passez le brassard dans la boucle et repliez dans le sens opposé. Enfin collez

Caractéristiques

Quantité par carton	50 pcs
Poids par carton	8 kg
Poids	220g